


P280


Entorno Safe Skin™ para sus pacientes



Espuma

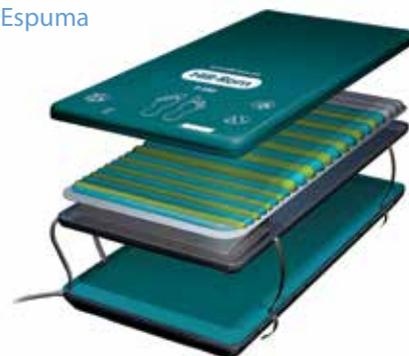

Aire

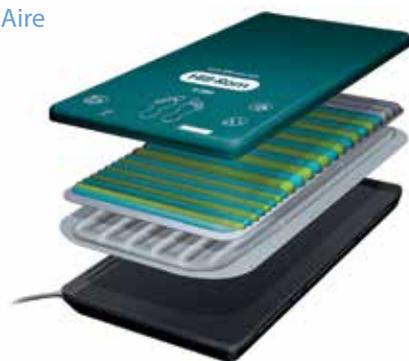

Prestaciones y beneficios

Diseñado especialmente para mejorar la prevención y el **tratamiento** de los pacientes con riesgo de padecer úlceras por presión

Una selección de terapias de baja presión continua o alterna que se adaptan a las necesidades del paciente y a las preferencias clínicas

Tiempos de ciclo regulables y ajuste de la firmeza para lograr una mayor comodidad y control sobre la terapia del paciente

Funciones de seguridad para el paciente y el profesional sanitario que incluyen bloqueo automático del panel de control, indicadores de error y modo de transporte de 10 horas

Tres áreas de redistribución de la presión que proporcionan más protección a las zonas vulnerables del cuerpo, incluida un área con una inclinación de 5° para los talones

Opciones de inflado P-MAX y PLUS que proporcionan más apoyo y seguridad durante la colocación y el transporte del paciente

El Sistema P280 permite disponer de la superficie terapéutica tanto en la versión aire como en espuma

P280

Sistema de superficie terapéutica y sobrecolchón

El sistema de superficie terapéutica o sobrecolchón P280 de Hill-Rom ayuda a prevenir y a tratar úlceras por presión en pacientes adultos con riesgo bajo o alto, ya que proporciona unos niveles regulables de inmersión y envolvimiento tanto en el modo de terapia de baja presión continua como alterna.

Este enfoque terapéutico reduce la compresión de tejidos vulnerables y está en consonancia con las directrices internacionales del NPUAP/EPUAP/PPPIA, que recomiendan a los facultativos que «utilicen una superficie de apoyo activa con los pacientes que tengan un riesgo alto de padecer una úlcera por presión cuando la recolocación manual frecuente no sea posible».¹

Especificaciones técnicas

Sobrecolchón

Longitud	200 cm
Anchura	90 cm
Altura	10 cm
Peso	6.1 kg

Superficie terapéutica - Espuma

Longitud	200 cm
Anchura	90 cm
Altura	17 cm
Peso	12 kg

Superficie terapéutica - Aire

Longitud	200 cm
Anchura	90 cm
Altura	17 cm
Peso	7.5 kg

¹ Directrices internacionales del EPUAP/NPUAP/PPPIA para la prevención y el tratamiento de úlceras por presión, 2014

Unidad de control

Longitud	29 cm
Anchura	20 cm
Altura	12 cm
Peso	2,2 kg

Carga de trabajo segura 250 kg
(Peso máximo del paciente)

Material de la funda

Revestimiento de poliuretano sobre poliéster, cremallera de 360°, costuras selladas, poca fricción, elástico en dos direcciones, permeable a la humedad, bacteriostático, fungiestático y antimicrobiano. Se puede limpiar y lavar. Se pueden utilizar disoluciones con cloro (≤ 1.000 ppm).

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10.000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países centrandos nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados en clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio**. Los empleados, programas y productos de Hill-Rom de todo el mundo tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios**.

No todos los productos/opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que se representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los centros sanitarios.

Los equipos médicos son productos sanitarios regulados y que portan, de acuerdo con esta normativa, la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de documento: 5E5119302-03, 30 junio 2016

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom